




大切にしたい。  
自立への気持ちと思いやり。

## 家具調トイレGS 家具調トイレGS 快適脱臭 取扱説明書

このたびは家具調トイレGSシリーズ  
をお買い求めいただきまして、  
まことにありがとうございます。  
正しくお使いいただくため、ご使用前  
に必ずお読みください。  
なお、取扱説明書は大切に保管して  
ください。

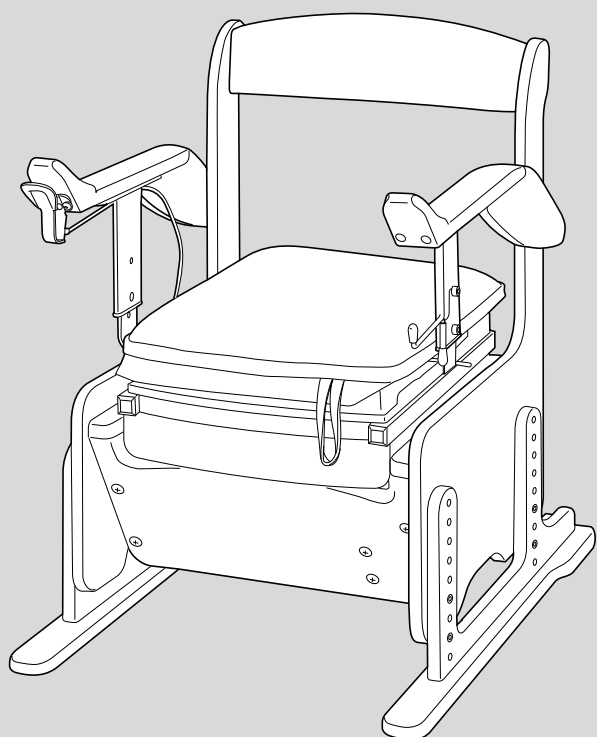

### もくじ

安全上のご注意	1~3
各部のなまえと同梱部品	4~6
特長	7
本体の組み立て方	8・9
ご使用前の準備と確認	10~13
使いかた	13・14
お手入れの方法	15・16
故障かな？と思ったら	17

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



## 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



## 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

### 共通



## 警告



改造はしないこと


また、修理技術者以外の人へ、分解したり修理をしないこと  
本体が正常にはたらかず、けがの原因になります。

### 快適脱臭のみ



## 警告


ぬれた手でACアダプターの  
抜き差しをしないこと  
感電の原因になります。

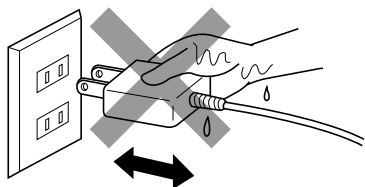

ACアダプター・コードを破損するよう  
なことをしないこと  
傷つけたり、加工したり、高温部に近づ  
けたり、無理に曲げたり、ねじったり、  
引っ張ったり、重いものを載せたり、  
束ねたりしないこと  
傷んだまま使用すると、感電・ショート  
・火災の原因になります。  
●コードやプラグの修理は、お買い上げ  
の販売店にご相談ください。

ACアダプターは、根元まで確実に  
差し込むこと

差し込みが不完全  
ですと、感電や発  
熱による火災の原  
因になります。

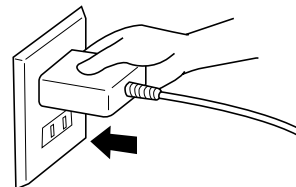

●傷んだACアダプター、ゆるんだ  
コンセントは使用しないでください。



お手入れの際は、必ずACアダプターを  
コンセントから抜くこと

ACアダプターのほこりなどは、定期的  
に取ること

ACアダプターにほこりがたまると、  
湿気などで、絶縁不良となり、火災の原  
因になります。

●長期間使用しないときは、  
ACアダプターを抜いてください。

# 安全上のご注意

## 共通

## ⚠ 注意

座面の開閉は、必ず持ち手を持って行なうこと  
別の部分を持って行なうと指をはさむ原因になります。



使用者が用便などの際、自分自身の身体を十分に安定させられないときは、介助者が必ず付き添うこと  
座面が傾斜した際、滑り落ちる危険があります。

背もたれやひじ掛けがしっかり固定されているか確認すること  
身体が不安定な状態となり、けがの原因になります。



座面の昇降時は必ず肘掛けを持って操作すること  
座面の横や下に手を置いておくと、指や手をはさむ原因になります。



補高脚は左右の脚が同じ高さになるようにし、ボルトで確実に固定すること  
本体が不安定になり、転倒したり、けがの原因になります。

必ず平たんな場所で使用すること

キャスターでの移動は、無理な段差や、凹凸面では行なわないこと  
本体が引っかかり、転倒やけがをしたり故障の原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えないこと

ボルトがゆるんでいないか、定期的に点検すること  
不安定になり、けがの原因になります。

各部の調節（高さ調節など）については販売店かケアマネジャーなど専門家に相談すること

使用者の身体状況によっては、介助者が付き添ったり、お買い上げの販売店かケアマネジャーなど専門家に相談すること


直射日光を避けて、室内でのみ使用すること

変色やソリ・ひび割れの原因になります。

体重が80kgを超える方は使用しないこと  
座面の昇降が正常にはたらかない恐れがあります。また、破損等の原因になります。

ひじ掛けを外して使用しないこと


転倒したり、けがをする原因になります。

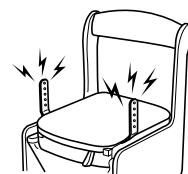

補高脚を外した状態で使用しないこと  
本体が不安定になり、転倒したり、けがの原因になります。

熱器具の近くや湿気の多い場所には設置しないこと

火災や変形の原因になります。

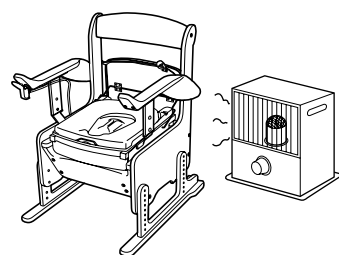


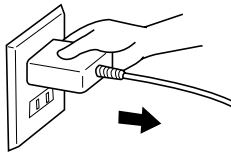



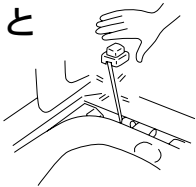
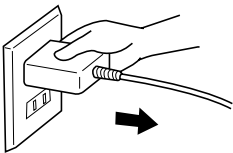
座面やひじ掛けの上に立ったりしないこと

転倒し、けがの原因になります。

子供・幼児を遊ばせるなど他の用途では使用しないこと


# 安全上のご注意

快適脱臭のみ		 注意	
	ACアダプターを抜くときは、コードを持たずに必ずACアダプター本体を持って引き抜くこと		脱臭器の排気口に物や手を入れないこと 回転するファンに巻き込まれ、けがの原因になります。また、ファンの故障の原因になります。
	脱臭器は、水洗いしないこと 脱臭器の内部に水が入ると故障の原因になります。		
	脱臭器に小便や水をかけないこと		
	脱臭器、ACアダプターは、落としたり、強い衝撃を与えないこと		




# 各部のなまえと同梱部品


## 同梱部品の確認

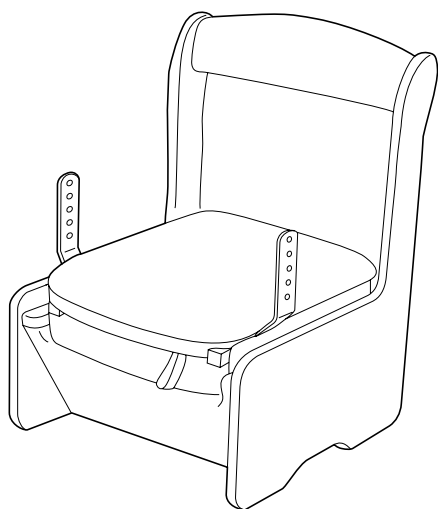


家具調トイレGS本体

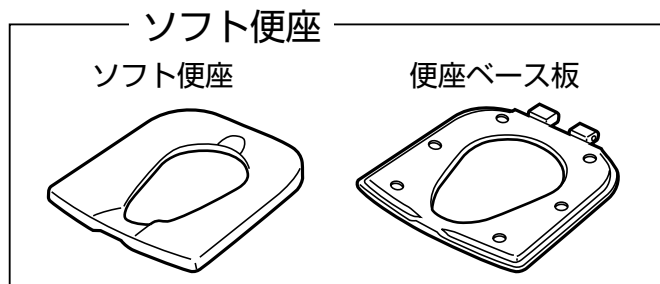

## 部 材

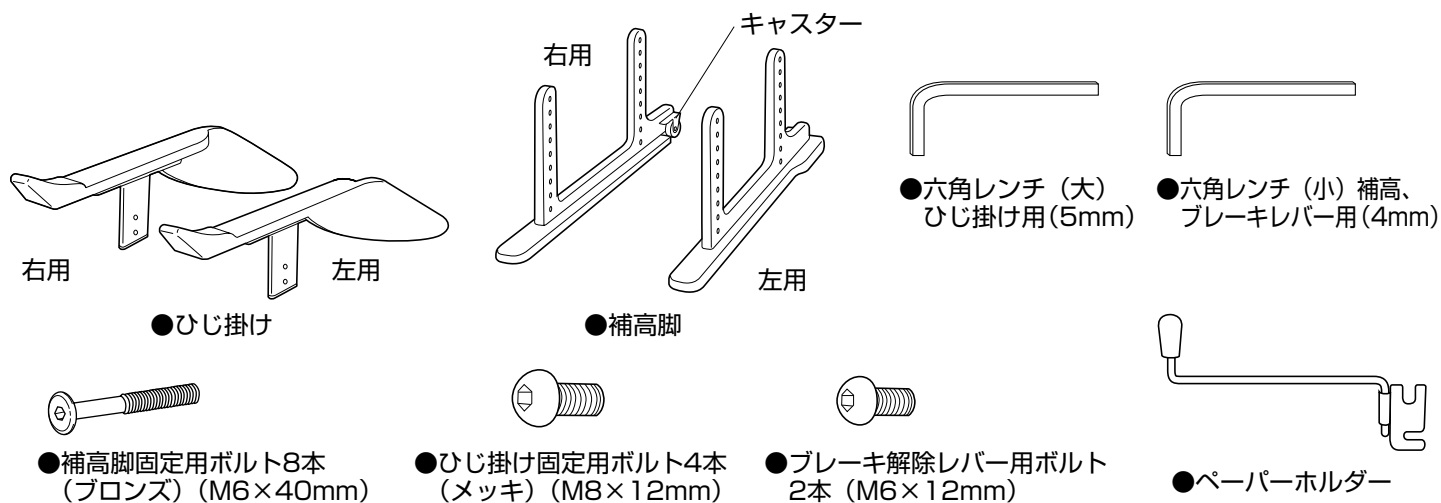

## 部材 (快適脱臭のみ)

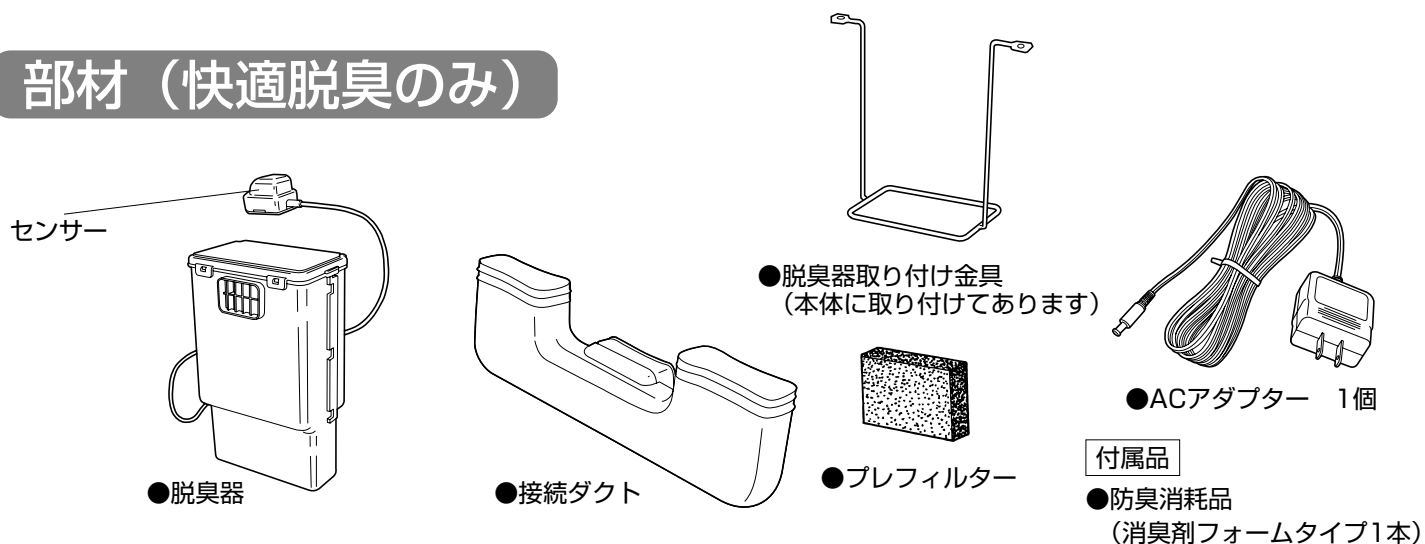

# 各部のなまえと同梱部品


## 仕様

品名	家具調トイレGS	家具調トイレGS 快適脱臭
材質	構造部材：天然木（ラバーウッド） 表面加工：ウレタン樹脂塗装 張り材：合成皮革 クッション材：ウレタンフォーム 受け板・バケツ・便座ベース板：ポリプロピレン ソフト便座：EVA（抗菌加工） フレーム：鉄 ペーパーホルダー：ステンレス鋼 接続ダクト：ポリエチレン（快適脱臭）	
寸法	60×69×高さ75～93cm (便座までの高さ 34・37・40・43・46・49・52cm)	60×69×高さ78～93cm (便座までの高さ 37・40・43・46・49・52cm)
重量	23kg	23.7kg
バケツ容量	10ℓ	
ガススプリング	50kgf	
	—	〈脱臭器〉
電源	—	AC100V (50/60Hz共用) DC12V (ACアダプター使用)
消費電力	—	約5W
脱臭方法	—	吸着脱臭方式
吸着材寿命	—	約7年（1日1時間使用した場合）
動作	—	人体を感知し自動的に起動 最終感知から5分後に停止
コード長	—	約1.9m

廃棄上のご注意

おすまいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。





## サイズ

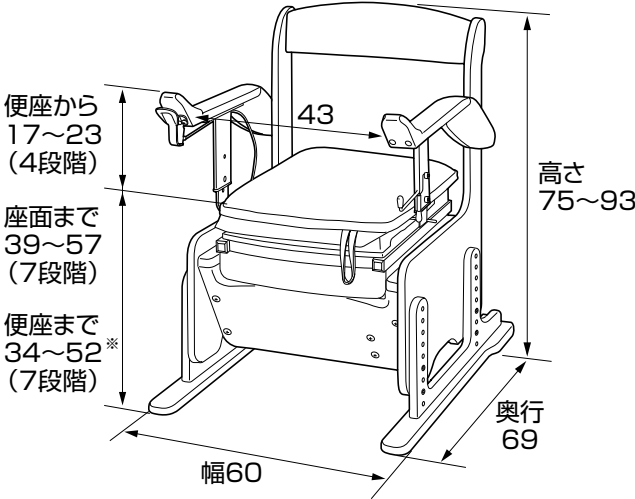


※GS＜快適脱臭＞は便座までの高さ37～52cmの6段階調節。

# 各部のなまえと同梱部品

## 各部の名称

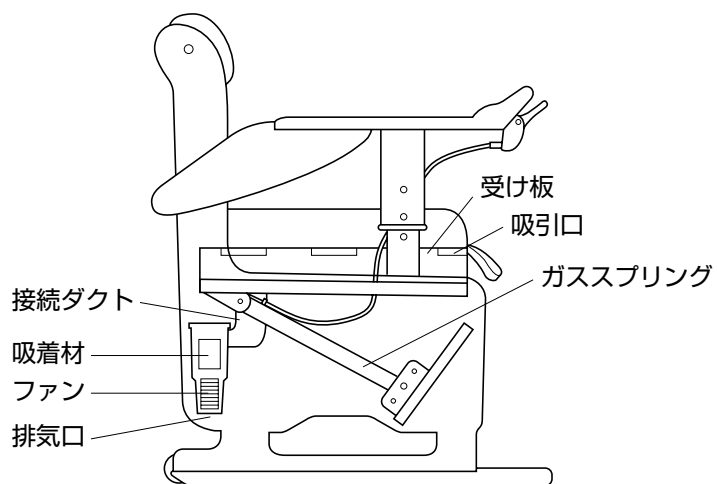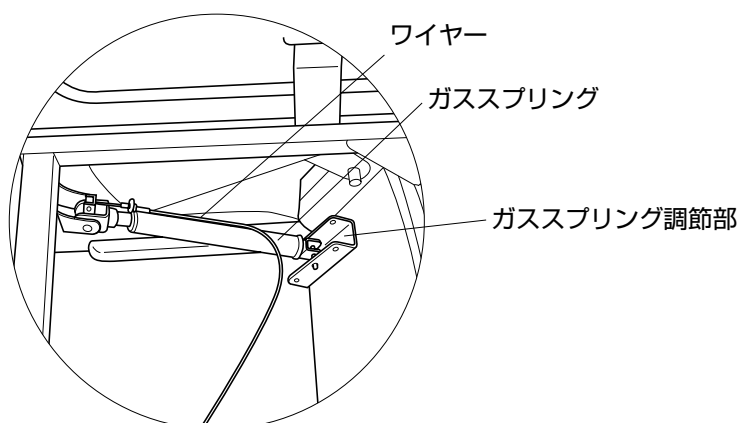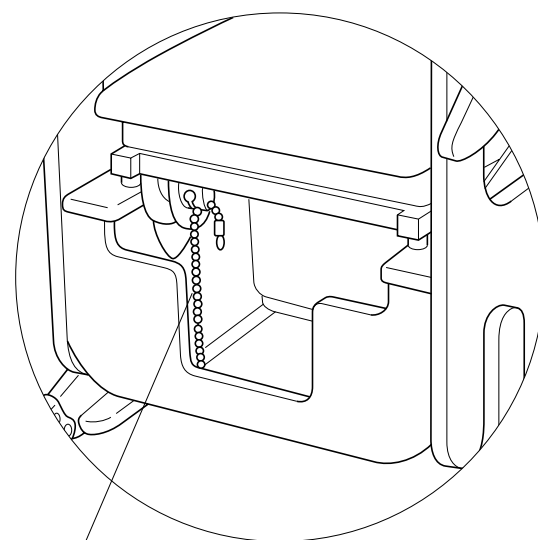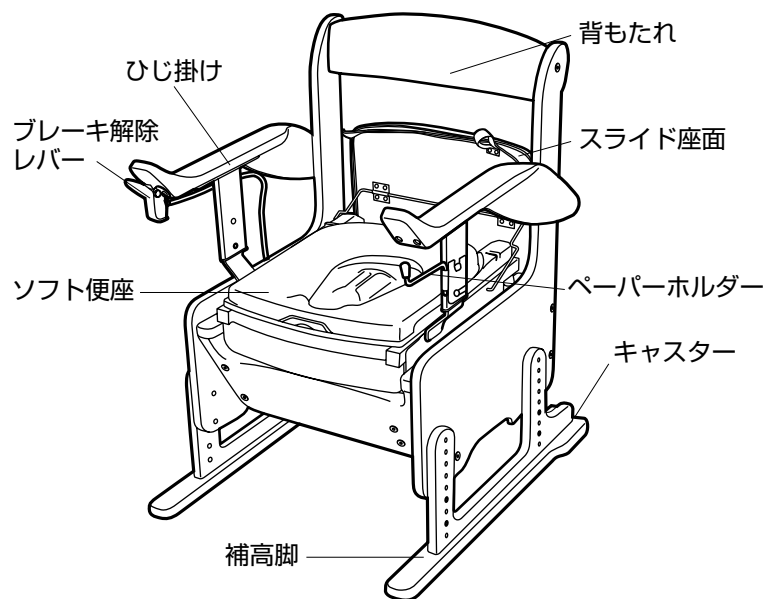

〈快適脱臭のみ〉

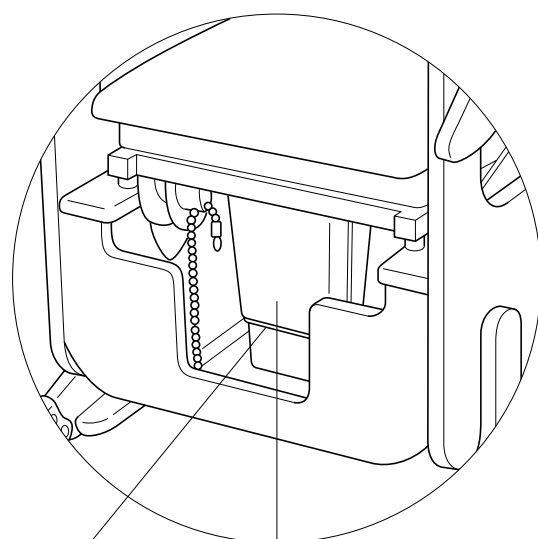

〈快適脱臭のみ〉

# 特長

---

- ガススプリングの力で立ち座りをサポートします。
- 独自のひじ掛け先端形状。前傾した状態でも、しっかりと手をつくことができます。
- ひじ掛けの高さは、4段階に調節可能です。(便座から17・19・21・23cm)
- 座面は最大23°まで前傾することで、立ち上がりやすい姿勢を取ることができます。
- ガススプリングの強さは、3段階に調節可能です。
- 操作は、レバーを引くだけで簡単です。レバーをはなすと、ブレーキがかかります。レバーは、左・右どちらにも取り付け可能です。
- 脚後部にはキャスターが付いているので移動が楽にできます。
- 十分な足引きスペースがあるので立ち上がりが楽にできます。
- 椅子として使えるソフト素材で軽量のスライド式座面を採用しています。
- ソフト便座には、着座時の痛みや冷たさを緩和するやわらかい素材を使用しています。(抗菌加工)汚れた時は、分解して洗えます。
- 便座高は、使われる方の体格に合わせて7段階の高さ調節が可能です。  
(34・37・40・43・46・49・52cm)  
※快適脱臭は、6段階(37・40・43・46・49・52cm)
- 便座・受け板を外して掃除できるので、いつも清潔にお使いいただけます。
- 便座はゆっくり閉まるオイルダンパーを採用しています。
- 受け板は、汚水がこぼれても汚れや臭いがしみ込みにくいプラスチック製です。
- ペーパーホルダーは、左右どちらにも取り付け可能です。

## 快適脱臭の特長

---

### 1 吸引構造

便座の下に6ヶ所の吸引口があり、脱臭器とつながった吸引口から臭いを強力に吸い取ります。

### 2 自動運転

センサーが、トイレに近づく人に反応して自動で運転を開始します。また、人が離れてから5分後に停止するタイマーつきです。

### 3 吸着材

吸着材は、触媒配合ハニカム活性炭で、悪臭を吸着して取り除きます。吸着材の寿命は、1日1時間の使用で約7年間使用することができます。



# 本体の組み立て方


## ひじ掛けの取り付け

- ①右用、左用のひじ掛けを確認し、本体のひじ掛け取付部に差し込みます。

※ひじ掛けの高さは、4段階（2cm間隔）に調節できます。

- ②ご使用になる方の体格に合わせて調節し、ひじ掛け固定ボルトを添付の六角レンチ（大）でしっかり締め付けてください。

※ボルトの締め付けは、はじめに手で回せるところまでねじ込んでおき、最後に六角レンチ（大）で締め付けると作業が効率よく行なえます。

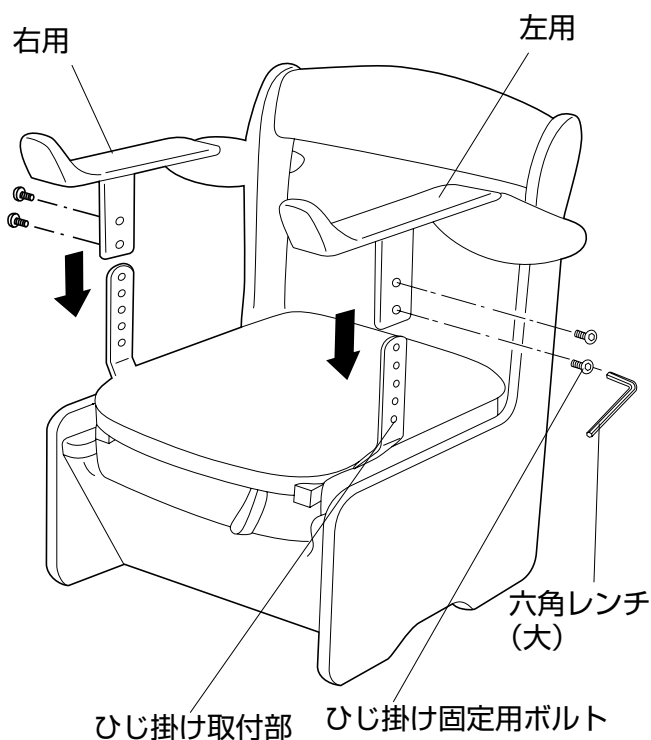

**ひじ掛けは、必ずひじ掛け固定ボルトで、しっかり固定すること**

ひじ掛けが外れたり、ガタついて身体が不安定になり、けがをする恐れがあります。



**必ず左右両方のひじ掛けを取り付けて、左右のひじ掛けが同じ高さで使用すること**

身体が不安定になり、けがをする恐れがあります。


## 脚部の取り付け

- ①本体側面の位置合わせピンと、脚部内側の目盛りを、お体に合った高さで合わせます。

- ②本体側面のピンと合わせた穴より一段上と一段下の穴に脚部固定ボルトを差込み、手で回らなくなるまで締め付けます。

- ③両方の脚部を取り付けたら、本体が安定することを確認した上で、添付の六角レンチ（小）でしっかり締め付けてください。

※ボルトの締め付けは、はじめに手で回せるところまでねじ込んでおき、最後に六角レンチ（小）で締め付けると作業が効率よく行なえます。

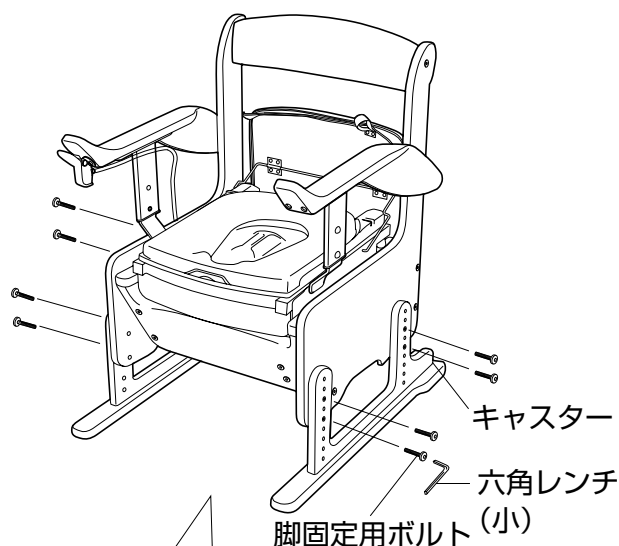


**脚部は必ず、固定ボルトでしっかり固定すること**

脚部がはずれたり、がたついて身体が不安定になり、けがをする恐れがあります。



**左右の脚部を同じ高さで使用すること**

本体が不安定になり、転倒してけがをする恐れがあります。

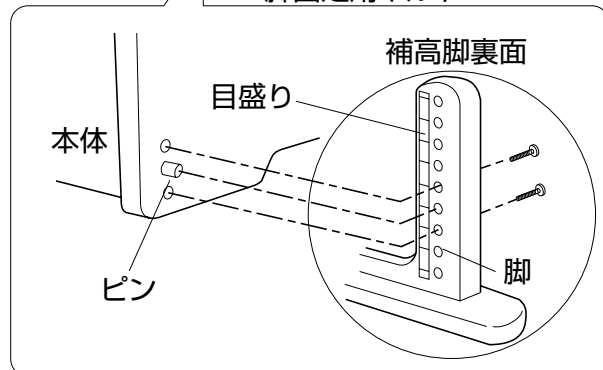

# 本体の組み立て方



## ブレーキレバーの取り付け

※レバーは、右側、左側のどちらかのひじ掛けに、取り付けます。開封時は、右側に取り付けられるように、本体の右側にワイヤーが配線されています。

- ①ワイヤーが、可動部分や、使用者の身体に引掛かったり折れ曲がらないようひじ掛けの外側へ配線します。
- ②レバーをひじ掛け先端のレバー取り付け位置にレバー取り付けボルトで固定します。
- ③ワイヤーのたるみは、本体のワイヤーガイドの部分で調節してください。






**ワイヤーを折り曲げたり、巻きつけないこと**  
ワイヤーを折り曲げると、操作ができなくなります。また、巻きついたり、極端に小さな円弧状に曲げたりすると、誤動作の原因になります。

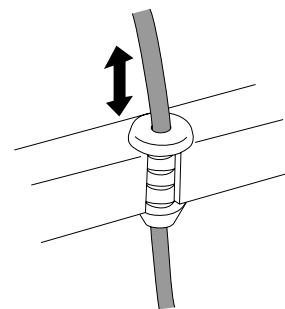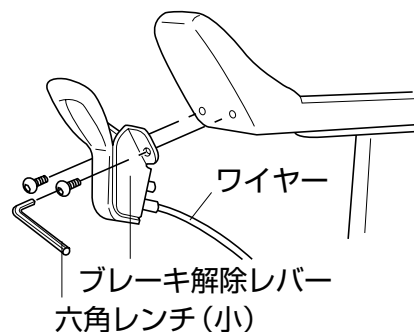


## ブレーキレバーを左側のひじ掛けに取り付ける方法

- ①スライド座面を開けてください。
- ②バケツ、受け板を取り外してください。
- ③一旦、右のひじ掛けにレバーを取り付け、レバーを引いてブレーキを解除し、座面を最大傾斜角度にします。
- ④ブレーキレバーを取り外します。ワイヤーガイドを上を引き上げて外し、フレームのサイドガードを少し押し広げて、ワイヤーを本体の後方へ引き出します。この際、サイドガードと本体との間に指を挟まないように注意してください。
- ⑤ワイヤーは、角度調節チェーンより内側を通して、左側へ配線し、フレームのサイドガードを少し押し広げて、ワイヤーガイドを本体左側の溝へ導き、取り付けます。
- ⑥ワイヤーが、可動部や使用者の身体に引っ掛かったり折れ曲がらないよう、ひじ掛けの外側へ配線されていることを確認して、レバーをひじ掛け先端のレバー取り付け位置に取り付けます。

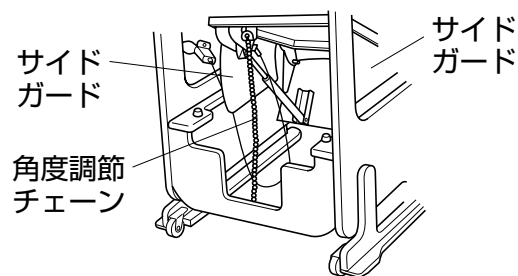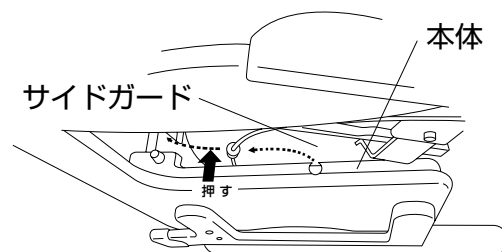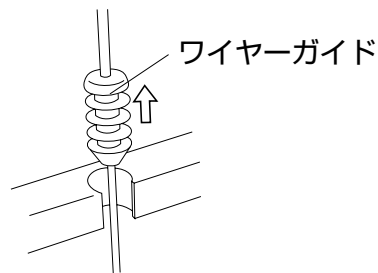

## ペーパーホルダーの取り付け

- ペーパーホルダーは、左右どちらでも取り付けることができます。
- 図の様にひじ掛け固定ボルトで、しっかり固定してください。

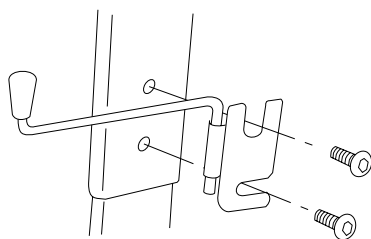

# ご使用前の準備と確認


## ガススプリングの調節

- 座面を前傾させる力は、使用する人の体重に応じてガススプリング調節部で3段階に調節することができます。開封時の設定は、②です。
- 下の表を参考に、使用する方の体重に応じて、設定を①～③に調節してください。

	①	②	③
体重目安 (kg)	25～40	40～60	60～80

## ガススプリングの調節のしかた

- ①ボールチェーンが張らないように、少し座面を傾けた状態で作業してください。
- ②ひもに指をかけて外側のスナップピンを引き抜く。
- ③シャフトを内側（矢印 ➡ の方向）に引き抜く。  
抜きにくい場合はガススプリングを持ち前後に動かしながらシャフトを抜きます。
- ④ガススプリングの穴を設定のめやすに合わせてシャフトを差し込む。
- ⑤シャフトの穴にスナップピンを差し込む。

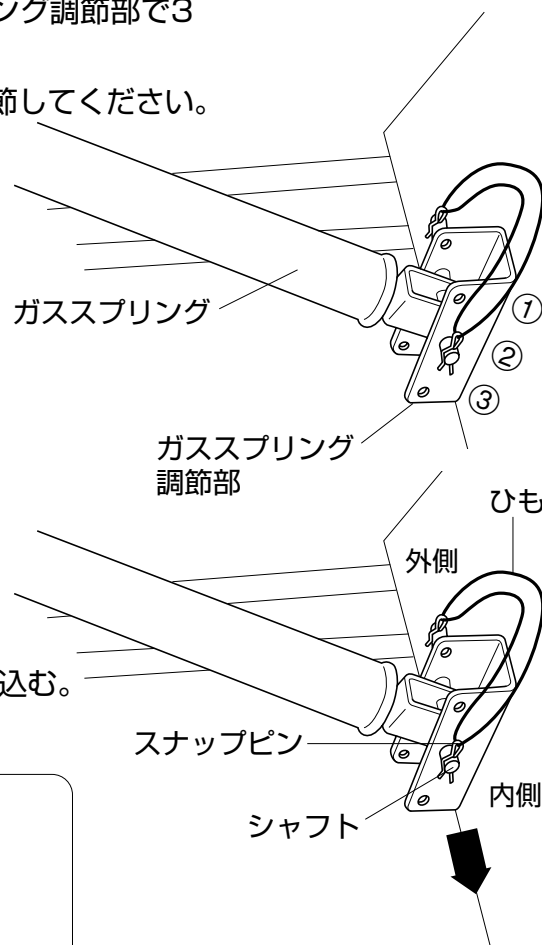

シャフトを外した状態でブレーキレバーを操作しないこと  
ガススプリングが伸びきると取りつけできなくなります。  
伸びきった場合は次項をご覧ください。



**本機は、身体を持ち上げるものではありません**

本機は、使用する方の立ち上がる動作を補助するトイレであり、使用する方が上半身の重心移動を行なうことで、座面が前傾します。

## ガススプリングが伸びてしまって、取り付けられなくなった場合


ガススプリング調節部のシャフトを外した状態で、ブレーキ解除レバーを操作すると、ガススプリングが伸びてしまい、取り付けられなくなります。このような場合、以下の順序で修復してください。



ガススプリングとワイヤー、ワイヤーの接続部、ガススプリングの取り付け部は、絶対に分解しないこと




- ①角度調節用のボールチェーンを木部に固定しているボルトとナットを外します。

※この状態では、座面の傾きは、23° 以上となり、  
前方へ転倒する危険があるので、絶対に立ち上がり補助として  
使用しないでください。

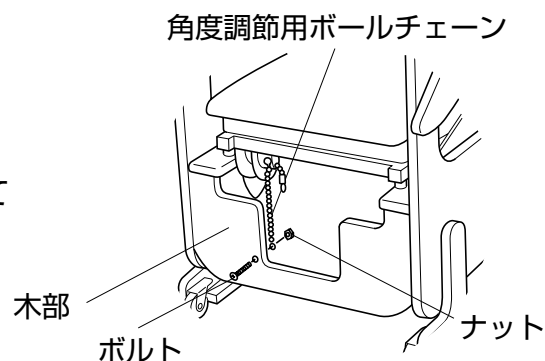

# ご使用前の準備と確認

- ②座面・汚物バケツ・受け板を外し、フレームを手で傾斜させ、ガスプリングをガスプリング調節部に取り付けます。
- ③ブレーキ解除レバーを引いて、座面を降ろし、角度調節用ボールチェーンをボルトとナットで木部に再度固定してください。

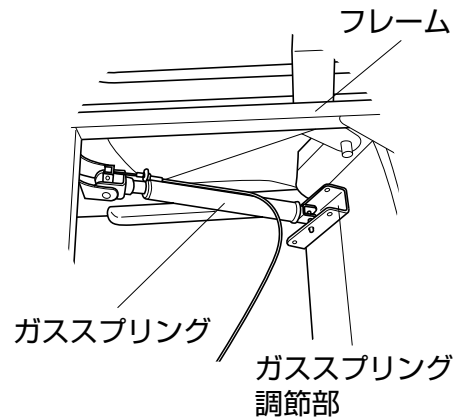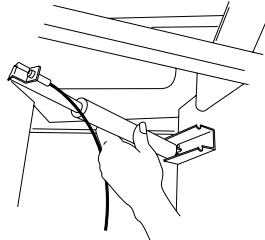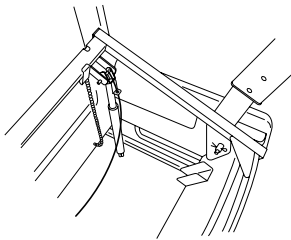



**注意** ガスプリング調節部と反対側（ワイヤーが接続されている側）のスナップピン及びシャフトは、絶対に外さないこと

**注意** ボルト・ナットがゆるんだ状態で使用しないこと

## 座面傾斜角度の調節のしかた

本体後部に取り付けられた、ボールチェーンの長さを調節することで、座面の最大傾斜角度を調節することができます。

- ①傾斜角度は最大で23° になりますが傾斜角度が大きすぎる場合は、ボールチェーンの位置を変更して、傾斜を小さく設定してください。
- ②ボールを丸穴の位置まで移動させ、チェーンの長さを調節してください。ボール1コで約9mm調節できます。

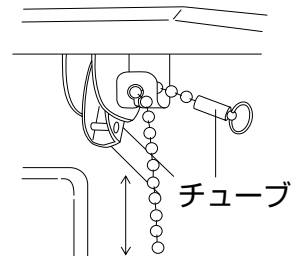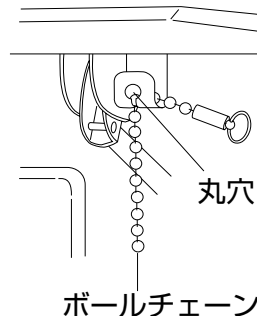

**注意** ボールチェーンのチューブを切り取って使用しないこと。また、ボールチェーンが切れた状態で使用しないこと  
座面が傾き、転倒の原因になります。また、バケツ内の汚物もこぼれます。

## バケツに水と防臭剤を入れる

- 防臭効果を高めるために、バケツに水約1～2リットル（バケツ内側の2と表示されている線まで）を入れ、防臭消耗品を入れてください。


※便座に座る前に用便してしまう場合もあります。あらかじめポータブルトイレ用消臭・防水シート（別売品）を敷いておくと、よりお部屋の清潔さが保たれ安心です。

**注意** ●バケツには、2ℓ以上の水を入れないこと  
●排便、排尿は、毎回処理し、バケツ内に3ℓ以上溜めないこと  
座面が傾斜した際、こぼれます。


# ご使用前の準備と確認

## 脱臭器の取り付けかた（快適脱臭）


- ①脱臭器の吸引口にプレフィルターを取り付けます。プレフィルターは、折れ曲がったり、しわが寄らないように取り付けてください。

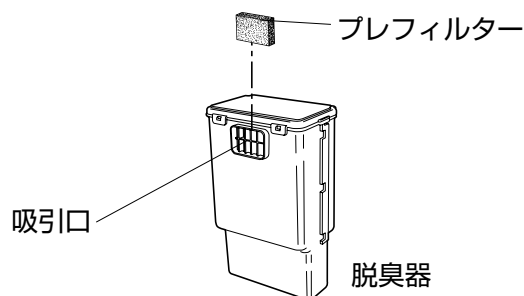


- ②スライド座面を外してください。バケツを外した後、本体から受け板を外し、受け板の裏側にある差し込み口（2つの長方形の穴）に接続ダクトを取り付けます。接続ダクトは、中央に穴のない面が前方となるように手でしっかりと奥まで差し込んでください。

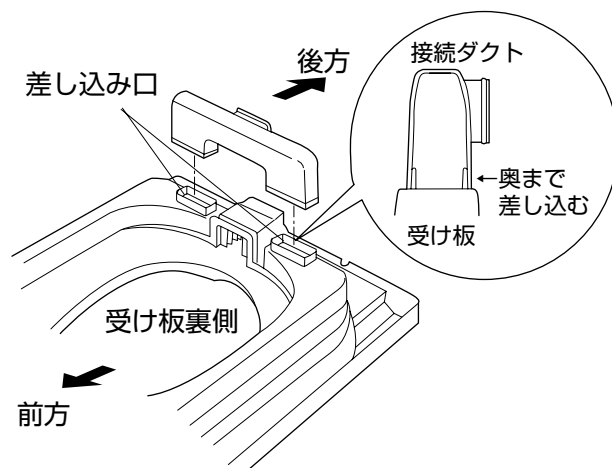


- ③脱臭器を脱臭器の吸引口が前方を向くようにトイレ本体の脱臭器取り付け金具に取り付けます。  
※脱臭器の上部がフレームに当たりますが、ゆっくり押し込んで取り付けてください。

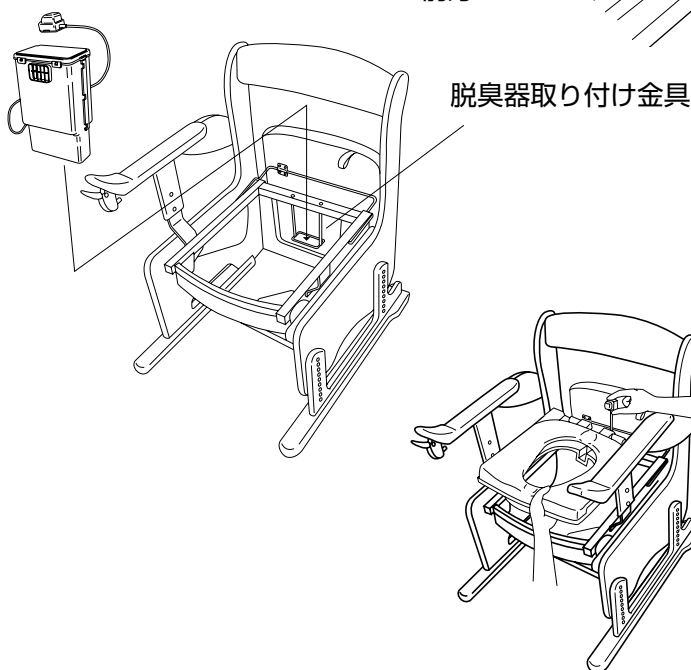

- ④受け板をトイレ本体に取り付けます。初めに受け板の後方を本体に当ててから取り付けると、簡単に付けることができます。このとき接続ダクトの中央の穴と、脱臭器の吸引口が接続されていることを確認してください。

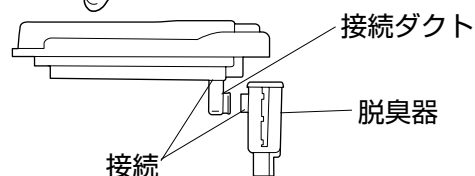

- ⑤図の向きに注意してセンサーを受け板のセンサー取り付け位置に取り付けてください。センサーとセンサー取り付け位置にはマジックテープが付いているので、簡単に着脱することができます。

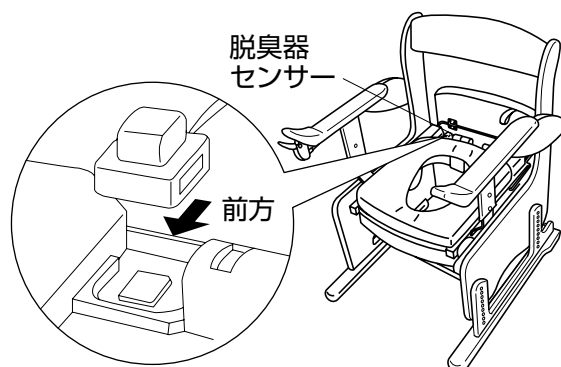


# ご使用前の準備と確認

⑥ACアダプターの端子を脱臭器本体の底にあるジャック穴にトイレ本体の下から差し込み、ACアダプター本体を家庭用電源（AC100V 50/60Hz）コンセントに差し込んでください。約30秒後、センサーが待機状態となり、人体を感知すると脱臭器が運転を開始します。

⑦センサーは人の動きを感知し続けると運転を継続しますが、人の動きを感知しなくなってから約5分後に運転を停止します。ご使用中でも長時間一定の姿勢で着座されたときは、センサーが使用者の動きを感知しないため停止することがありますが、故障ではありません。

このような時は、お体を前後に軽く動かすか、センサーの前に手をかざして、センサーが人体の動きを感知するようにしてください。

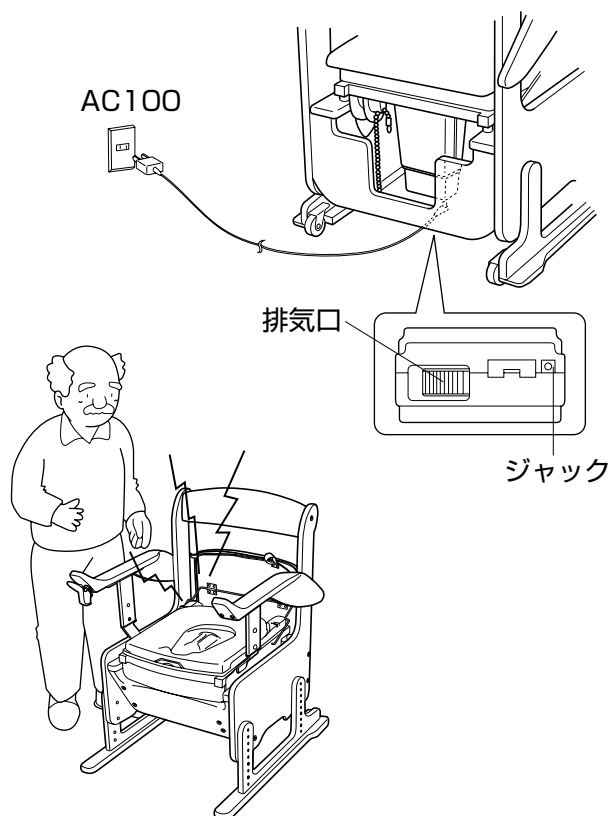

接続ダクトは、しっかり接続してあることを確認し、異物等を挿入したり、挟み込まないこと  
吸引力を低下させたり、故障の原因になります。

## 使いかた（基本的な使いかた）

### 1 座面をスライドさせる


- 取手部を持ち上げると容易に開閉することが出来ます。

### 2 便座の中央後ろ寄りに座る

- 通常のトイレとしてお使いください。

### 3 使用後の汚物処理

- 便座をはね上げ、バケツに蓋をして、柄をしっかりと持ってゆっくりとバケツを取り出します。
- バケツの汚物をトイレに流し、バケツを洗浄後、水と防臭消耗品をいれて、バケツをポータブルトイレに戻します。
- ※バケツ内へは、ティッシュペーパーなどトイレトペーパー以外のものは入れないこと  
トイレで処理する際、詰まる原因になります。
- バケツ内の水や汚物は、使用のたびに処理することをおすすめします。

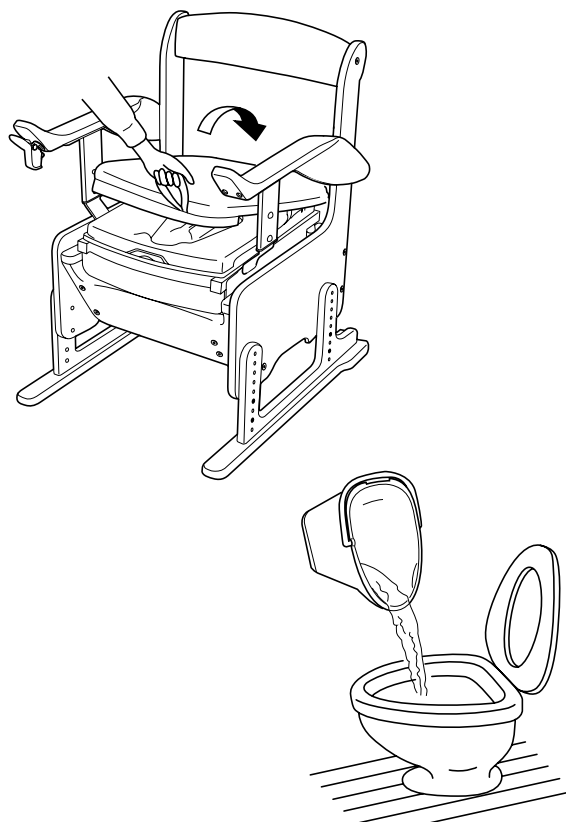

# 使いかた（立ち上がり補助機能）



注意

立ち上がり補助機能は、座面をかぶせた状態で椅子として使用するときも、座面を後方へスライドさせてトイレとして使用するときも、ご使用いただけます。しかし、衣類を着用したまま座られますと、座面が傾斜したときに、おしりが滑りやすくなりますので、転落しないようご注意ください。また、身体を安定させられない方が使用するときには、必ず介助者が付き添うようにしてください。




注意

ガススプリングの設定については、10、11ページの「ご使用前の準備と確認」（ガススプリングの調節）をご覧ください。ご自身の身体と、身体の状態に合わせて、各部を調節してください。本補助装置は、立ち上がり補助だけでなく、着座するときも、ひざへの負担を軽減する効果があります。

## 1 座る

- ① トイレを平らなところへ置いてください。
- ② 両手でひじ掛けをもち、座面に深く腰かけてください。
- ③ ひじ掛けの先端についているブレーキ解除レバーを握ると、ブレーキが解除され、座面がゆっくり下降します。下降しない場合は、上半身を少し後方へ移動させてください。それでも下降しない場合は、ガススプリングの設定が強すぎるので、一段低く設定してください。
- ④ ブレーキ解除レバーを離すと、ブレーキが掛かります。下降の途中で離すと、離れた位置で停止して座面を維持することができます。

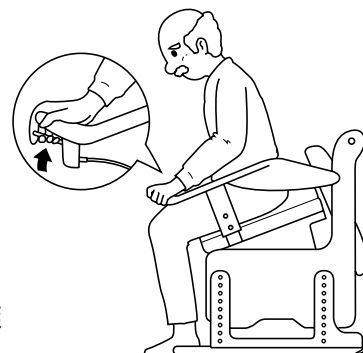


## 2 立ち上がる


- ① 両手をひじ掛けにかけ、正面を向いて座ってください。
- ② ひじ掛けの先端についているブレーキ解除レバーを握ると、ブレーキが解除され、座面が起き上がる状態になります。
- ③ 上半身をゆっくり前方へ移動させてください。（上半身の重心が身体の前方へ移動して、立ち上がり易い位置へ来ると、座面も上昇します。）
- ④ ひじ掛けに両手をついて、自力で立ち上がってください。



座位

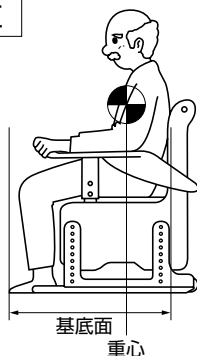

座面傾斜

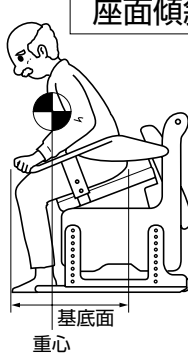

座面傾斜



- ・ 広い基底面
- ・ 体重心が足の下に無い

- ・ 狭い基底面
- ・ 体重心が足の下にある

- ・ 便座は7cm上昇（坐骨結節）
- ・ 上昇とともに前方へ5cm移動
- ・ 肘掛けを利用して立ち上がり

安定した状態でゆっくり立ち上がるためには、立ち上がりには先立って体幹を前傾し、体重心を両足接地面上の領域にもってこることが重要です。臀部が便座から離れたときに体重心が両足の接地面内にあるように準備しておけば、楽に立ち上がることができます。

# お手入れの方法

## 1 普段のお手入れは

- ① やわらかい布で水ぶきし、よくしぼった布でふきとります。
  - 乾いた布やトイレットペーパーなどでふかないでください。  
本体に傷がつく原因になります。
- ② 汚れが目立つときは、  
中性洗剤をやわらかい布にふくませて、汚れをふき取りそのあと水ぶきします。



タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと





本体や便座などを傷つける原因になります。

塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、殺虫剤等は使用しないこと

木部の塗装がはがれたり金属部を腐食させたり、プラスチックが劣化または破損し、けがの原因になります。

## 2 受け板・汚水受けのお手入れは

- ① 便座をはね上げ、バケツを取り出します。
- ② 受け板を取り外します。快適脱臭は、受け板にセンサーがついているので、センサーを取り外してから、受け板を取り外してください。
- ③ 中性洗剤で洗い、水ですすぎ、よくしぼった布でふきます。
- ④ 汚水受けの汚れは、中性洗剤をやわらかい布にふくませて汚れをふきとり、そのあと水ぶきしてください。
- ⑤ 受け板を取り付けます。

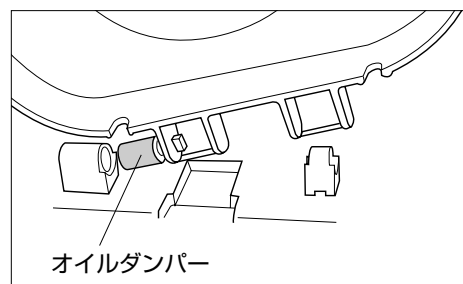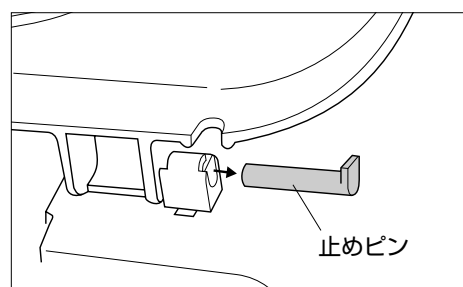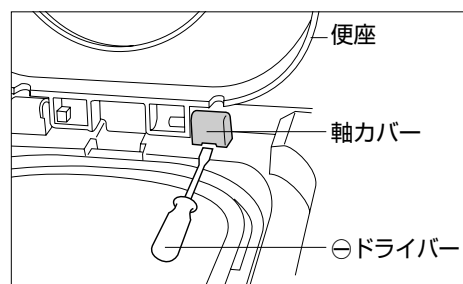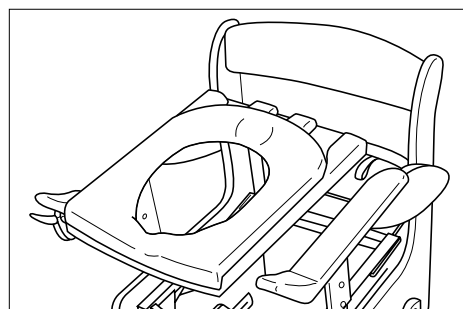



## 3 便座の取り外しかた

- ① スライド式座面を後ろへスライドさせ、便座を上げます。
- ② 軸力バーの溝にードライバー等を入れ、上に引き上げ、軸力バーを取り外します。
- ③ 止めピンを抜き、便座を軸受けから取り外します。
- ④ 最後に受け板の軸穴からオイルダンパーをぬき、便座を取り外します。

## 4 ソフト便座の分解

ソフト便座は  
便座ベース板から分解できます。

裏面の凸部を押して分解してください。

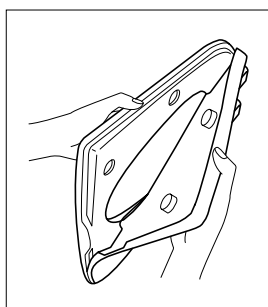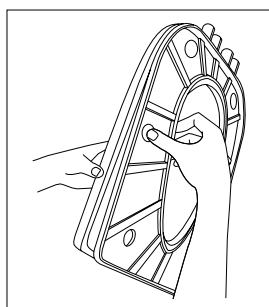


ソフト便座と便座ベース板に分解する際、無理にひっぱらないこと  
強く引っばると、ソフト便座が破損します。




# お手入れの方法

## 4 受け板カバーの外しかた（快適脱臭）

- ① スライド式座面を後へスライドさせ、便座を上げて、バケツを取り出します。
- ② 受け板の前方にある2ヶ所のツメを、図のように硬貨等を差し込んで外します。
- ③ 受け板カバーの前方を外して、ななめ上前方へ引き上げて外します。
- ④ 取り付ける時は、受け板カバーの後方を受け板に差し込み、受け板カバーの4ヶ所のツメを受け板にしっかりはめ込んでください。

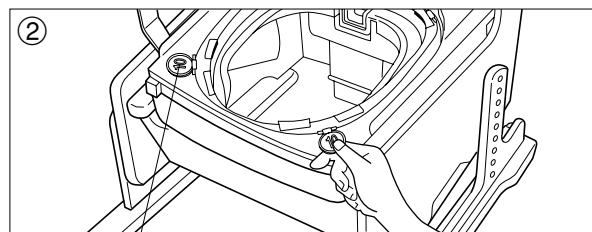

ツメに硬貨等を差し込んで、外す

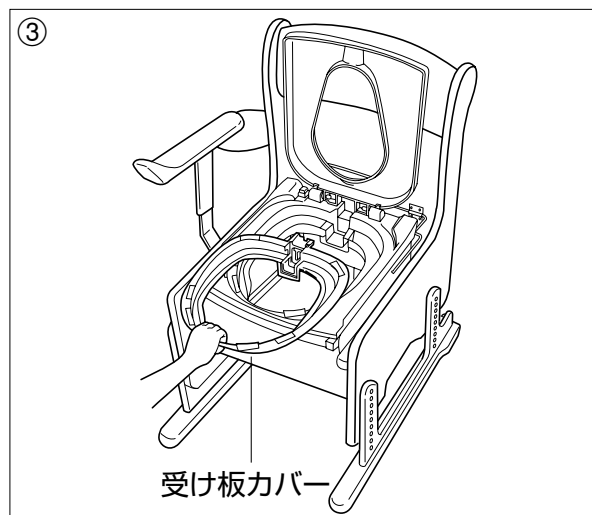


## 5 接続ダクトの外しかた（快適脱臭）

- ① スライド座面を外します。
- ② センサーを受け板から外します。
- ③ 受け板の後部を少し持ち上げながら手前に外します。
- ④ 受け板からダクトを外します。
- ⑤ 12ページの脱臭器の取り付けかた（快適脱臭）を参考にしてください。




注意

センサーコードを引張ったり、折り曲げたりしないこと  
断線して故障の原因になります。

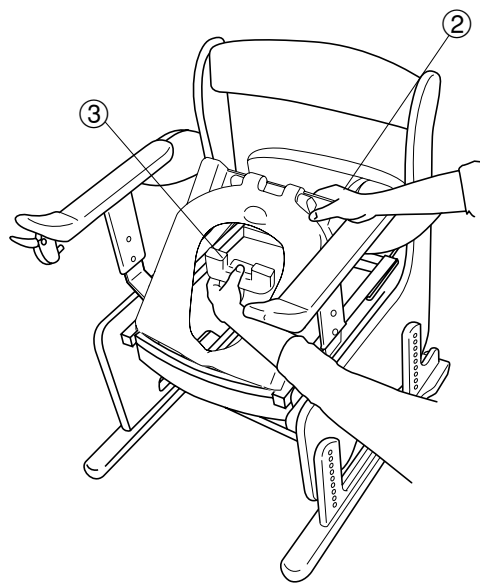

## 6 脱臭器のお手入れ

- ① ACアダプターを外し、センサーを受け板から外します。
- ② 脱臭器をトイレ本体から引き上げ取り外します。
- ③ 受け板内のダクト及び接続ダクトは、汚れやほこりがたまりやすいので、時々ブラシ等でほこりを取り除いてください。また、落ちにくい汚れは、水で洗い流します。
- ④ 接続ダクトと脱臭器の間にあるプレフィルターは、ほこりがたまりやすいので、月に1度は外して、やわらかいブラシ等でほこりを取り除いてください。

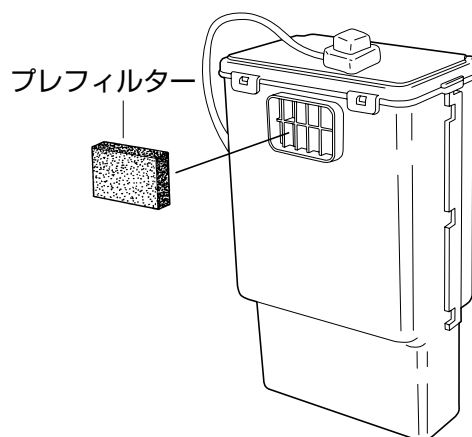

# 故障かな？と思ったら

修理などを依頼される前に、本書をよくお読みの上、次の点をお調べ下さい。


こんなとき	調べるところ・原因	処 置
座面が上がらない	ブレーキ解除レバーを握っていますか	ブレーキ解除レバーを握る
	角度調節用ボールチェーンの長さは適当ですか	角度調節用ボールチェーンを調節する →P11
座面が下がらない	ブレーキ解除レバーを握っていますか	ブレーキ解除レバーを握る
	ガスピリングの調節は適切ですか	ガスピリングの調節を弱くする →P10、11
においが取れない	プレフィルターにほこりがつまっていませんか	プレフィルターの掃除をする →P16
	受け板の吸引口、脱臭器排気口をふさいでいる物はありませんか	ふさいでいるものを取り除く
	受け板カバー・接続ダクト・脱臭器がしっかり接続されていますか	正しく接続する →P12、16
センサーに手をかざしても動作しない	センサーが汚れていませんか	センサーを掃除する
	ACアダプターはしっかり差し込まれていますか	ACアダプターを差し込みなおす →P13
人がいないのに作動し続ける	座面は開いていませんか	座面を閉じる

- 木製部分は天然素材なので、色や木目はカタログ等と多少異なる場合がありますのでご了承ください。
- 製品の仕様および価格は予告なしに変更することがあります。

10.06

製品に関するご意見・お問い合わせは

## お客様相談室

フリーダイヤル  **0120-86-7735**  
 (受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
 (12:00～13:00はのぞく)



## アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL (03) 5420-1556  
 FAX (03) 5420-7750

東京支店 ☎(03)5420-1562  
 大阪支店 ☎(06)6448-5127  
 名古屋支店 ☎(052)203-0396  
 福岡支店 ☎(092)741-1411

仙台支店 ☎(022)291-5477  
 広島支店 ☎(082)245-7100  
 札幌営業所 ☎(011)709-6011

910608-1